


WOUNDCLOT™




Every
drop is
Precious™

Core Scientific Creations Ltd. 29 Nahshon Street 4926918 Petah Tikva, Israel
www.woundclot.org | info@woundclot.com | +972-3-735-9555

SURGICAL

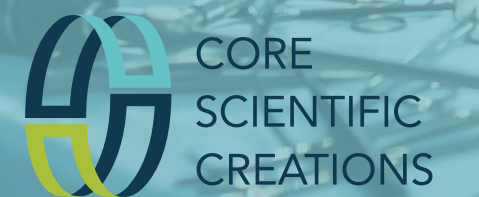

WoundClot™ Surgical

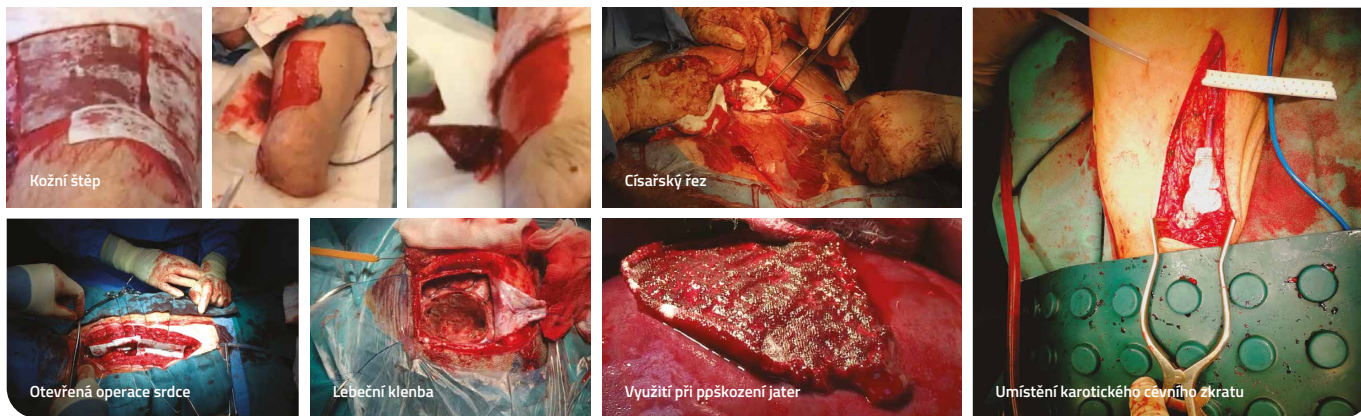

Představujeme WoundClot™ Surgical

WoundClot™ Surgical je revoluční chirurgická hemostatická tkanina, zdravotnický prostředek třídy III pro perioperační a pooperační krvácení. WoundClot™ se v kontaktu s krví mění v jedinečnou, patentovanou 3D gelovou matici

- Dosahuje rychlé a stabilní hemostázy expanzí a přilnutím k ráně a okolním tkáním i v případě silného krvácení.
- Absorbuje až 25násobné množství krve než činí jeho původní hmotnost a působí v ráně až 24 hodin.
- Funguje bez použití manuální komprese.
- Aktivuje koagulační faktory k zastavení kapilárního, žilního a tepenného krvácení.

Skvělý pro pacienty

WoundClot™ Surgical zlepšuje výsledky chirurgických zákroků

- Snižuje nebo eliminuje potřebu krevní drenáže a transfuze.
- Vysoká úroveň bezpečnosti: je hypoalergenní, bez kontraindikací a toxicity.
- Účinný u pacientů s koagulopatií nebo antikoagulační či antiagregační léčbou,
- Snadno se odstraňuje bez bolesti a poranění.

Skvělý pro chirurgy a zdravotnický personál

WoundClot™ Surgical šetří drahocenný čas

- Snadno se aplikuje, nevyžaduje použití manuální komprese.
- Zastavuje krvácení a chrání proti krvácení až 24 hodin.
- Snadno se odstraňuje s minimální bolestí bez obnovy krvácení, může se ponechat in situ.

Skvělý pro zdravotnická zařízení

WoundClot™ Surgical pomáhá zdravotnickým zařízením k dosažení stanovených cílů

- Vyžaduje minimální školení.
- Schváleno CE, zdravotnický prostředek třídy III.

Jak funguje WoundClot™ Surgical?

V místě aplikace přichází WoundClot™ Surgical do kontaktu s krví a velké množství ji absorbuje, tím se jeho jedinečná celulózová struktura mění v hustou, pružnou, expandující gelovou membránu, která přilne k povrchu rány.

WoundClot™ Surgical je účinný bez nutnosti použití manuální komprese, takže chirurg může pokračovat v práci. WoundClot™ Surgical je vysoce absorbční a absorbuje až 25násobné množství krve než činí jeho původní hmotnost. V ráně také pokračuje aktivně v absorpci po dobu až 24 hodin.

WoundClot™ Surgical využívá několik mechanismů účinku: rychlá absorpce krve, adherenci a expanzi v ráně, agregaci krevních destiček, červených krvinek (RBC) a koagulačních faktorů a aktivaci faktorů XI a XII.

WoundClot™ Surgical účinkuje na různých typech tkání a komplikovaných ran, včetně cév, vnitřních orgánů, kostí a kůže.

Jak se WoundClot™ Surgical odstraňuje?

WoundClot™ Surgical je biologicky odbouratelný, k biologickému rozkladu dochází za sedm až deset dní. Případně lze WoundClot™ Surgical z rány snadno odstranit bez rizika obnovy krvácení:

- Sejměte WoundClot™ Surgical z místa aplikace.
- Odstraňte sraženinu.
- Opláchněte oblast fyziologickým roztokem nebo vodou, abyste z rány odstranili případné zbytky.

Jaké jsou další jedinečné vlastnosti WoundClot™ Surgical?

- **Není exotermní**
Nezpůsobuje tepelné poranění a nedegraduje koagulaci.
- **Neoxidovaná celulóza**
Skládá se z neoxidované, neregenerované celulózové struktury (NONRCS).
- **Nedráždivý**
Nezpůsobuje alergické reakce a podráždění pokožky.

Objednávky

WoundClot™ Surgical je k dispozici v následujících rozměrech:

Katalogové číslo	Popis
102211101	WoundClot™ Surgical 10 cm × 10 cm
102255101	WoundClot™ Surgical 5 cm × 5 cm
102257101	WoundClot™ Surgical 5 cm × 7,5 cm

